

MEDOO

世界领先的民族高端医疗器械品牌

泛血管介入解决方案提供商

国际领先医疗介入疗法

民族创新医疗介入品牌

脉动医学 全系列产品手册

PRODUCT PORTFOLIO

精于形 归于心

合作医院 3000+

产品开发经验 15年+

畅销国家 50+

专利 100+

临床患者 80W+

在研核心项目 50+

CONTENTS

目录

01

技术资质

QUALIFICATION

02/ 中国、欧盟注册证书

05/ 生产许可证、专利证书

02

应用场景

APPLICATION

06/ 临床科室

03

半顺应性 PTCA 球囊扩张导管

MECROSS™ CTO

08/ 产品介绍

09/ 订货信息

顺应性表格

04

非顺应性 PTCA 球囊扩张导管

MECROSS™ NC

10/ 产品介绍

11/ 订货信息

顺应性表格

05

冠状动脉高压 球囊扩张导管

MECROSS™ HP

12/ 产品介绍

13/ 订货信息

技术参数

顺应性表格

06

外周球囊扩张导管

MECROSS™ PTA

14/ 产品介绍

16/ 顺应性表格

17/ 订货信息

20/ 技术参数

21/ 临床应用



07

快速交换型颅内 球囊扩张导管

NEUCROSS™ RX

24/ 产品介绍
25/ 订货信息
技术参数
顺应性表格

08

整体交换型颅内 球囊扩张导管

NEUCROSS™ OTW

26/ 产品介绍
27/ 订货信息
技术参数
顺应性表格

09

动脉压迫止血器

R&B™

28/ 产品介绍
29/ 订货信息
产品信息

10

一次性使用非血 管腔道斑马导丝

SMOWire™

30/ 产品介绍
31/ 产品参数
斑马导丝构造示意图
产品规格型号

11

导丝

STRwire™

32/ 产品介绍
33/ 产品参数
导丝构造示意图
产品规格型号

12

超声刀具

MeSonic™

34/ 产品介绍
36/ 订货信息
技术参数

13


脉动球囊定制服务

BDC CUSTOMIZATION SERVICE

37/ 球囊定制
球囊顺应性
导管定制


脉动全系产品

世界领先的民族高端医疗器械品牌

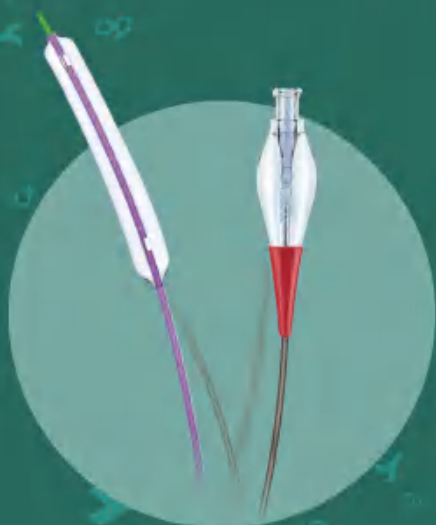

【半顺应性 PTCA 球囊扩张导管】

MECROSS™ CTO
(心内科)

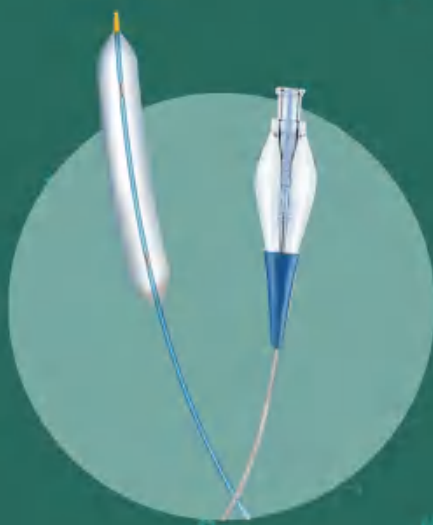

【非顺应性 PTCA 球囊扩张导管】

MECROSS™ NC
(心内科)



【冠状动脉高压球囊扩张导管】

MECROSS™ HP
(心内科)



【外周球囊扩张导管】

MECROSS™ PTA14"
(血管外科)



【外周球囊扩张导管】

MECROSS™ PTA18"
(血管外科)



【外周球囊扩张导管】


MECROSS™ PTA35"
(血管外科)





【快速交换型颅内球囊扩张导管】

NEUCROSS™ RX
(神经内科)

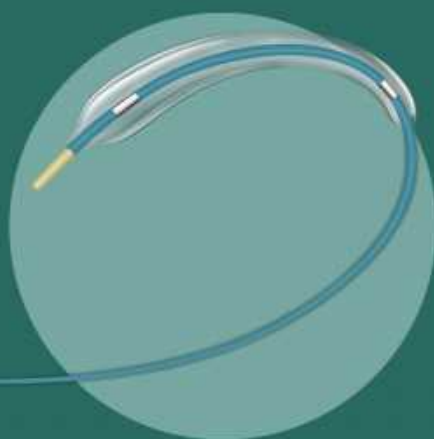

【整体交换型颅内球囊扩张导管】

NEUCROSS™ OTW
(神经内科)




【动脉压迫止血器】

R&B™
(介入科)




【超声刀具】

MeSonic™
(普通外科)

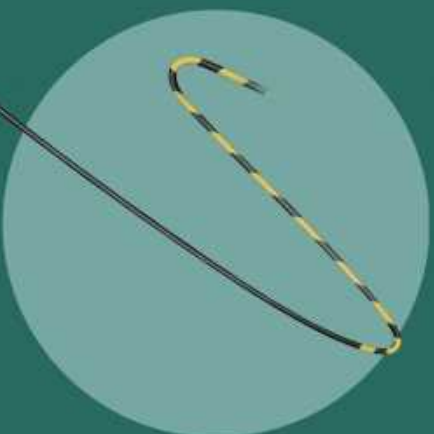

【一次性使用非血管腔道斑马导丝】

SMOWire™
(泌尿科)

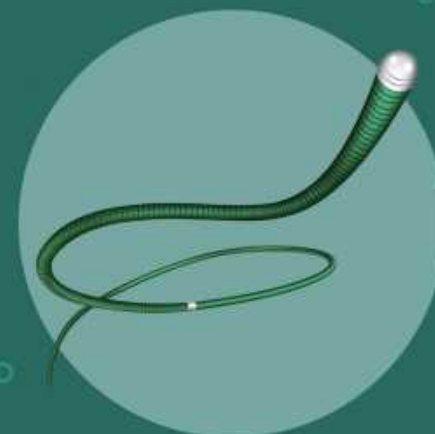


【导丝】

STRwire™
(心内科)



注册人名称	江苏康华医疗器械有限公司
注册人住所	江苏省扬州市江都区大桥镇江都大道 32 号
生产地址	江苏省扬州市江都区大桥镇江都大道 32 号
注册人名称	李成烈
注册人住所	不适用
产品名称	超声刀头
型号、规格	HF-11-14E-011、HF-01-2-13-015、HF-01-10-0-015、HF-11-13-0-015
预期使用用途	产品用于手术时上腹部、肩部、手臂、手掌部位的人体皮肤（含）以下部位：除皱；手术切口和创面手术刀头使用。
技术名称	超声刀头产品无热损伤、无手术损伤的器械、可单手操作的手术刀头 2mm 的型号。
型号、规格	产品技术要求
其他内容	
备注	

注册部门：江苏省药品监督管理局
 注册日期：2023 年 1 月 10 日
 发证日期：2023 年 1 月 10 日
 有效期：2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 10 日

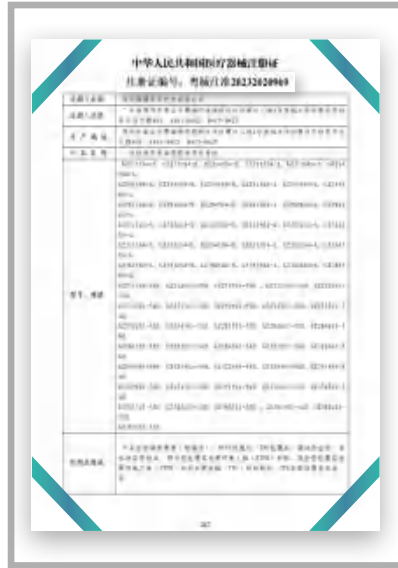

▼ 欧盟注册证书





EC Design-Examination Certificate

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II Section 4

CE 662148

No.
Issued to:
CE Number:
Shenzhen Medoo Medical Tech.Co.,Ltd
Room 1014-1017
B Block,Liyuan Business Building
Dongfeng Road South, Nanshan District
Shenzhen
Guangdong
518054
China

In respect of:

MECROSS CTO PTCA balloon catheter

BSI has performed a design examination on the above devices in accordance with the Council Directive 93/42/EEC, Annex II Section 4. The design conforms to the requirements of this directive, for marketing of these products in accordance with Section 4 conditions is required.

For and on behalf of BSI, a Notified body for this above Directive (Notified Body Number 2797):


Albert Rocco, Regulatory Lead

First issued: 2019-03-15

Date: 2019-03-15

Expiry Date: 2024-03-14

„making excellence a habit“

Page 1 of 8



EC Design-Examination Certificate

Supplementary Information to CE 662148

Issued to:
Shenzhen Medoo Medical Tech.Co.,Ltd
Room 1014-1017
B Block,Liyuan Business Building
Dongfeng Road South, Nanshan District
Shenzhen
Guangdong
518054
China

Catalogue Number	Device Name	Model Type	Intended purpose per EU	Classification
MC-01-1010	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO	The MeCross CTO™ Balloon Dilatation Catheter is indicated by balloon dilatation of the stenotic portion of coronary artery or legible graft stenosis for the purpose of improving myocardial perfusion.	Class III
MC-01-1015	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1020	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1030	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1210	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1215	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1220	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1230	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1235	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III
MC-01-1240	MECROSS CTO PTCA balloon catheter	MeCross CTO		Class III

First issued: 2019-03-15

Date: 2019-03-15

Expiry Date: 2024-03-14

„making excellence a habit“

Page 2 of 8



EC Design-Examination Certificate

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II Section 4

CE 662150

No.
Issued to:
CE Number:
Shenzhen Medoo Medical Tech.Co.,Ltd
Room 1014-1017
B Block,Liyuan Business Building
Dongfeng Road South, Nanshan District
Shenzhen
Guangdong
518054
China

In respect of:

MECROSS NC PTCA balloon catheter

BSI has performed a design examination on the above devices in accordance with the Council Directive 93/42/EEC, Annex II Section 4. The design conforms to the requirements of this directive, for marketing of these products in accordance with Section 4 conditions is required.

For and on behalf of BSI, a Notified body for this above Directive (Notified Body Number 2797):


Albert Rocco, Regulatory Lead

First issued: 2019-03-15

Date: 2019-03-15

Expiry Date: 2024-03-14

„making excellence a habit“

Page 1 of 5



EC Design-Examination Certificate

Supplementary Information to CE 662150

Issued to:
Shenzhen Medoo Medical Tech.Co.,Ltd
Room 1014-1017
B Block,Liyuan Business Building
Dongfeng Road South, Nanshan District
Shenzhen
Guangdong
518054
China

Catalogue Number	Device Name	Model Type	Intended Purpose Per EU	Classification
MC-02-2008	MECROSS NC PTCA balloon catheter	MeCross NC	The MeCross NC™ Balloon Dilatation Catheter is indicated for balloon dilatation of the stenotic portion of coronary artery or legible graft stenosis for the purpose of improving myocardial perfusion, balloon dilatation of a stent after implantation.	Class III
MC-02-2010				
MC-02-2012				
MC-02-2015				
MC-02-2018				
MC-02-2208				
MC-02-2210				
MC-02-2212				
MC-02-2215				
MC-02-2218				
MC-02-2508				
MC-02-2510				
MC-02-2512				
MC-02-2515				
MC-02-2518				
MC-02-2708				
MC-02-2710				
MC-02-2712				
MC-02-2715				

First issued: 2019-03-15

Date: 2019-03-15

Expiry Date: 2024-03-14

„making excellence a habit“

Page 2 of 5

▼ 公司资质



▼ 专利证书



MEDOO



颅内球囊用于颅内动脉粥样硬化狭窄介入治疗 [临床科室：神经科]



PTA 球囊用于外周血管介入治疗 [临床科室：血管外科]



PTCA 球囊用于经皮冠状动脉介入手术 [临床科室：心血管内科]



超声刀是临床外科的新型手术设备 [临床科室：普外科]

- 多产品 ——精益求精 / 匠心钻研四大手术品类及十款产品
- 多型号 ——产品种类齐全 / 型号丰富 / 满足临床更多尺寸
- 多科室 ——涵盖心血管内科、血管外科、神经科多科室手术
- 多场景 ——给术者提供更多尺寸选择、满足不同病变的需求



造福世界千万泛血管类疾病患者

脉动医疗产品

穿越无极限，万般皆有可能

UNLIMITED CROSSING FORCE,
EVERYTHING IS POSSIBLE



MEDOO

MECROSS™ NC

Balloon Dilatation Catheter



半顺应性 PTCA 球囊扩张导管

MECROSS™ CTO

穿越
无限

Unlimited Crossing Force

1

A-Advance 尖端设计
快速进入

2

最小 1.0mm 球囊直径
解决最复杂的 CTO 病变


3

超滑 S-Coating 涂层
游刃有余

4

“无缝”力传导技术
提供充沛的推送力

NMPA 注册证号：国械注准 20183030557
BSI 认证号：CE 662148

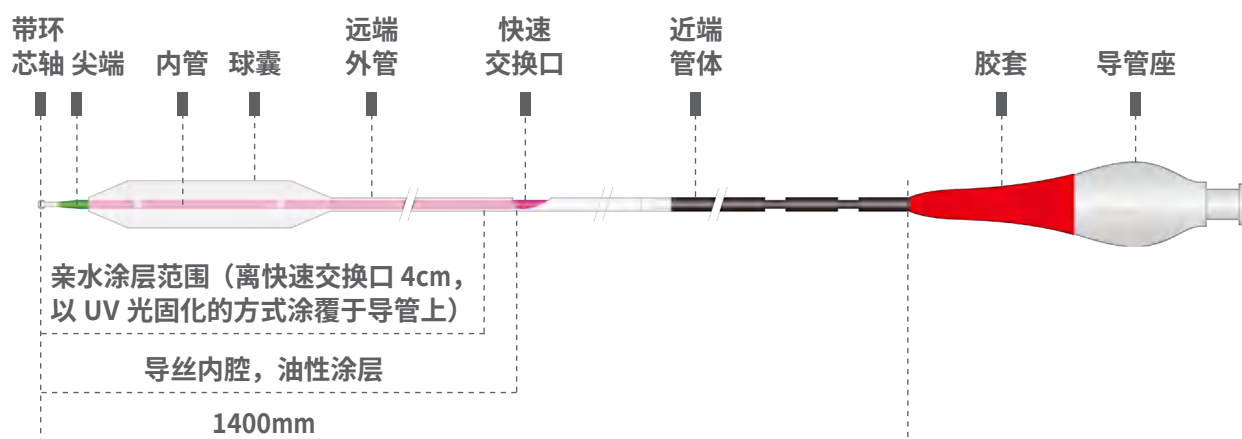

MeCross CTO- ϕ 2.0-4.0mm 示意图



MeCross CTO- ϕ 1.0-1.75mm 远端示意图

订货信息 ORDERING INFORMATION

ϕ (mm)	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	4.0
Length(mm)												
10	MC-01-1010	1210	1510	1710	2010	2210	2510	2710	3010	3210	3510	4010
15	MC-01-1015	1215	1515	1715	2015	2215	2515	2715	3015	3215	3515	4015
20	MC-01-1020	1220	1520	1720	2020	2220	2520	2720	3020	3220	3520	4020
30	MC-01-1030	1230	1530	1730	2030	2230	2530	2730	3030	3230	3530	4030

顺应性表格 COMPLIANCE INFORMATION

ϕ (mm)	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	4.0
Pressure(atm)												
2	0.90	1.15	1.40	1.65	1.87	2.15	2.36	2.60	2.82	3.05	3.30	3.78
4	0.95	1.20	1.45	1.70	1.94	2.20	2.45	2.67	2.91	3.15	3.40	3.90
6(NP)	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00
8	1.05	1.30	1.55	1.80	2.05	2.35	2.57	2.85	3.10	3.35	3.63	4.13
10	1.10	1.35	1.60	1.85	2.11	2.40	2.64	2.95	3.18	3.45	3.74	4.25
12	1.15	1.40	1.65	1.90	2.19	2.50	2.71	3.00	3.27	3.55	3.85	4.35
14	1.20	1.45	1.70	1.95	2.25	2.55	2.80	3.05	3.35	3.65	3.95	4.45
16(RBP)	1.23	1.50	1.75	2.00	2.32	2.60	2.85	3.15	3.45	3.75	4.05	4.58
18	1.25	1.55	1.80	2.05	2.38	2.68	2.93	3.25	3.55	3.85	4.15	4.68



非顺应性 PTCA 球囊扩张导管

MECROSS™

NC

1 A-Advance 尖端设计
外柔内韧保护血管


2 超滑 S-Coating 涂层
游刃有余

3
精确扩张
杜绝狗骨头现象

打开生命之门
Treasure the life

4
“无缝”力传导技术
提供充沛的推送力

NMPA 注册证号：国械注准 20183030555
BSI 认证号：CE 662150

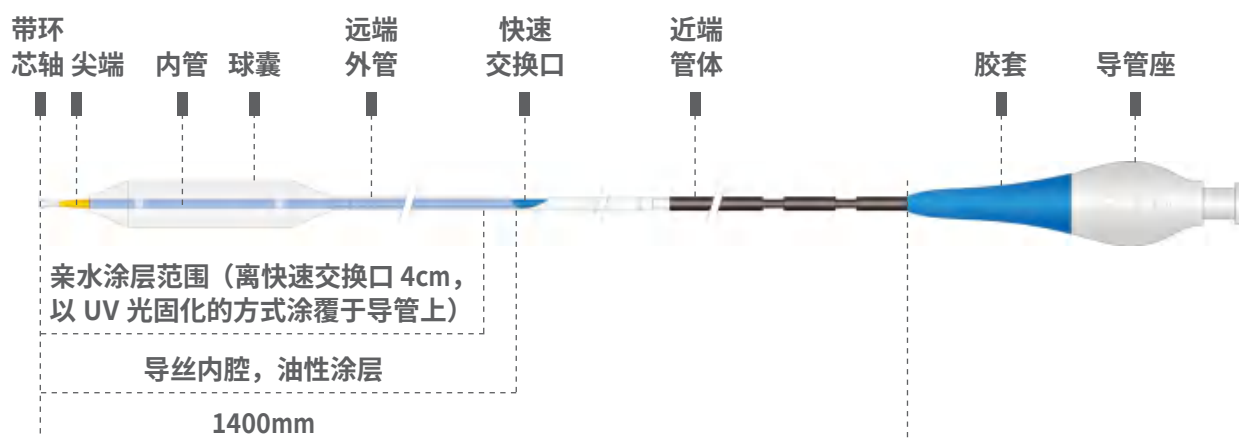

MeCross NC 示意图

📦 订货信息 ORDERING INFORMATION

ø(mm)	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	4.5	5.0
Length(mm)											
8	MC-02-2008	2208	2508	2708	3008	3208	3508	3708	4008	4508	5008
10	MC-02-2010	2210	2510	2710	3010	3210	3510	3710	4010	4510	5010
12	MC-02-2012	2212	2512	2712	3012	3212	3512	3712	4012	4512	5012
15	MC-02-2015	2215	2515	2715	3015	3215	3515	3715	4015	4515	5015
18	MC-02-2018	2218	2518	2718	3018	3218	3518	3718	4018	4518	5018

📋 顺应性表格 COMPLIANCE INFORMATION

ø(mm)	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	3.75	4.0	4.5	5.0
Pressure(atm)											
8	1.96	2.20	2.45	2.69	2.94	3.18	3.42	3.67	3.90	4.35	4.92
10	1.98	2.23	2.47	2.72	2.97	3.22	3.46	3.71	3.95	4.43	4.96
12(NP)	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00
14	2.02	2.27	2.53	2.78	3.03	3.29	3.54	3.79	4.05	4.55	5.07
16	2.04	2.30	2.56	2.81	3.07	3.32	3.58	3.83	4.10	4.62	5.14
18	2.07	2.33	2.58	2.84	3.10	3.36	3.63	3.88	4.16	4.69	5.22
20	2.09	2.35	2.61	2.87	3.13	3.40	3.67	3.92	4.21	4.75	5.28
22(RBP)	2.11	2.38	2.64	2.90	3.17	3.43	3.72	3.96	4.27	4.82	5.35
24	2.14	2.40	2.67	2.94	3.20	3.47	3.76	4.00	4.32	4.89	5.40
26	2.16	2.43	2.70	2.97	3.24	3.51	3.80	4.05	4.38	4.97	5.49
28	2.18	2.46	2.73	3.00	3.27	3.55	3.85	4.05	4.44	5.00	5.57



冠状动脉高压球囊扩张导管

MECROSS™ HP



1 A-Advance 尖端设计

外柔内韧保护血管

5

更优异的非顺应性

超高额定爆破压

2

超滑 S-Coating 涂层

游刃有余

3

精确扩张

杜绝狗骨头现象

4

“无缝”力传导技术

提供充沛的推送力

坚如磐石
Rock the heart

NMPA 注册证号：国械注准 20233030377

订货信息 ORDERING INFORMATION

ø(mm)	2.0	2.5	2.75	3.0
Length(mm)				
8	MC-03-2008	MC-03-2508	MC-03-2708	MC-03-3008
10	MC-03-2010	MC-03-2510	MC-03-2710	MC-03-3010
12	MC-03-2012	MC-03-2512	MC-03-2712	MC-03-3012
15	MC-03-2015	MC-03-2515	MC-03-2715	MC-03-3015

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

性能	参数	性能	参数
球囊直径 (mm)	2.0/2.5/2.75/3.0	额定爆破压	30atm
球囊长度 (mm)	8/10/12/15	兼容导丝	0.014"
工作长度 (mm)	1400	兼容导管	5F
标记带	双标记环	球囊结构	RX 快速交换结构
命名压	12atm		

顺应性表格 COMPLIANCE INFORMATION

ø(mm)	2.0	2.5	2.75	3.0
Pressure(atm)				
10	1.98	2.48	2.72	2.98
12(NP)	2.00	2.50	2.75	3.00
14	2.02	2.53	2.78	3.04
16	2.03	2.56	2.79	3.07
18	2.08	2.59	2.86	3.11
20	2.12	2.63	2.92	3.16
22	2.14	2.65	2.94	3.18
24	2.18	2.67	3.00	3.20
26	2.21	2.69	3.04	3.23
28	2.25	2.72	3.09	3.26
30(RBP)	2.30	2.75	3.15	3.30



外周球囊扩张导管

MECROSS™ PTA

万般皆有可能
Everything is possible

*PTA 0.014"

超滑 S-Coating 涂层
游刃有余

双腔管道
快速充泄压

6

优化折叠工艺
回抱性能好

5

A-Advance 尖端
快速进入

1

***PTA 0.035"**

型号齐全
覆盖范围广

2

4

3

通过剖面小
轻松穿越病变

***PTA 0.018"**



顺应性表格

COMPLIANCE INFORMATION

PTA 0.014"

ø(mm)	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
Pressure(atm)								
2	1.20	1.44	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84	4.80
4	1.22	1.47	1.96	2.45	2.94	3.43	3.92	4.90
6 (NP)	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00
8	1.28	1.53	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	5.10
10	1.30	1.56	2.08	2.60	3.12	3.64	4.16	5.20
12	1.33	1.59	2.12	2.65	3.18	3.71	4.24	5.30
14(RBP)	1.35	1.62	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40
16	1.37	1.65	2.20	2.75	3.30	3.85	4.40	5.50

PTA 0.018"

ø(mm)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
Pressure(atm)										
2	1.92	2.40	2.88	3.36	3.70	4.80	5.76	6.72	7.68	8.64
4	1.96	2.45	2.94	3.43	3.82	4.90	5.88	6.86	7.84	8.82
6(NP)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
8	2.04	2.55	3.06	3.57	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18
10	2.08	2.60	3.12	3.64	4.16	5.20	6.24	7.28	8.32	9.36
12	2.12	2.65	3.18	3.71	4.24	5.30	6.36	7.42	8.48	9.54
14(RBP)	2.16	2.70	3.24	3.78	4.32	5.40	6.48	7.56	8.64	9.72
16	2.20	2.75	3.30	3.85	4.40	5.50	6.60	7.70	8.80	9.90

PTA 0.035"

ø(mm)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
Pressure(atm)												
2	1.90	2.37	2.85	3.32	3.80	4.75	5.70	6.65	7.60	8.55	9.50	11.40
4	1.95	2.43	2.92	3.41	3.90	4.87	5.85	6.82	7.80	8.77	9.75	11.70
6(NP)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
8	2.05	2.56	3.07	3.58	4.10	5.12	6.15	7.17	8.20	9.22	10.25	12.30
10	2.10	2.62	3.15	3.67	4.20	5.25	6.30	7.35	8.40	9.45	10.50	12.60
12	2.15	2.69	3.22	3.76	4.30	5.37	6.45	7.52	8.60	9.67	10.75	12.90
14(RBP)	2.20	2.75	3.30	3.85	4.40	5.50	6.60	7.70	8.80	9.90	11.00	13.20
16	2.25	2.81	3.37	3.93	4.50	5.62	6.75	7.87	9.00	10.12	11.25	13.50

订货信息 ORDERING INFORMATION

PTA 0.014"

球囊长度 (mm)	工作长度 (mm)	型号参考	球囊直径 (mm)/ 产品型号目录							
			1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
15	1000	MC-07-100-	012015	015015	020015	025015	030015	035015	040015	050015
	1300	MC-07-130-	-	015015	020015	025015	030015	035015	040015	050015
	1400	MC-07-140-	-	-	020015	025015	030015	035015	040015	050015
	1500	MC-07-150-	012015	015015	020015	025015	030015	035015	040015	050015
20	1000	MC-07-100-	012020	015020	020020	025020	030020	035020	040020	050020
	1300	MC-07-130-	-	015020	020020	025020	030020	035020	040020	050020
	1400	MC-07-140-	-	-	020020	025020	030020	035020	040020	050020
	1500	MC-07-150-	012020	015020	020020	025020	030020	035020	040020	050020
40	1000	MC-07-100-	012040	015040	020040	025040	030040	035040	040040	050040
	1300	MC-07-130-	-	015040	020040	025040	030040	035040	040040	050040
	1400	MC-07-140-	-	-	020040	025040	030040	035040	040040	050040
	1500	MC-07-150-	012040	015040	020040	025040	030040	035040	040040	050040
80	1000	MC-07-100-	012080	015080	020080	025080	030080	035080	040080	050080
	1300	MC-07-130-	-	015080	020080	025080	030080	035080	040080	050080
	1400	MC-07-140-	-	-	020080	025080	030080	035080	040080	050080
	1500	MC-07-150-	012080	015080	020080	025080	030080	035080	040080	050080
100	1000	MC-07-100-	012100	015100	020100	025100	030100	035100	040100	050100
	1300	MC-07-130-	-	015100	020100	025100	030100	035100	040100	050100
	1400	MC-07-140-	-	-	020100	025100	030100	035100	040100	050100
	1500	MC-07-150-	012100	015100	020100	025100	030100	035100	040100	050100
120	1000	MC-07-100-	012120	015120	020120	025120	030120	035120	040120	050120
	1300	MC-07-130-	-	015120	020120	025120	030120	035120	040120	050120
	1400	MC-07-140-	-	-	020120	025120	030120	035120	040120	050120
	1500	MC-07-150-	012120	015120	020120	025120	030120	035120	040120	050120
150	1000	MC-07-100-	012150	015150	020150	025150	030150	035150	040150	050150
	1300	MC-07-130-	-	015150	020150	025150	030150	035150	040150	050150
	1400	MC-07-140-	-	-	020150	025150	030150	035150	040150	050150
	1500	MC-07-150-	012150	015150	020150	025150	030150	035150	040150	050150



订货信息 ORDERING INFORMATION

PTA 0.018"

球囊长度 (mm)	工作长度 (mm)	型号参考	球囊直径 (mm)/ 产品型号目录									
			2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
20	450	MC-08-045-	-	-	-	-	-	050020	060020	070020	-	-
	750	MC-08-075-	020020	025020	030020	035020	040020	050020	060020	070020	080020	090020
	1300	MC-08-130-	020020	025020	030020	035020	040020	050020	060020	070020	080020	090020
	1500	MC-08-150-	020020	025020	030020	035020	040020	050020	060020	-	-	-
40	450	MC-08-045-	-	-	-	-	-	050040	060040	070040	-	-
	750	MC-08-075-	020040	025040	030040	035040	040040	050040	060040	070040	080040	090040
	1300	MC-08-130-	020040	025040	030040	035040	040040	050040	060040	070040	080040	090040
	1500	MC-08-150-	020040	025040	030040	035040	040040	050040	060040	-	-	-
60	450	MC-08-045-	-	-	-	-	-	050060	060060	070060	-	-
	750	MC-08-075-	020060	025060	030060	035060	040060	050060	060060	070060	080060	090060
	1300	MC-08-130-	020060	025060	030060	035060	040060	050060	060060	070060	080060	090060
	1500	MC-08-150-	020060	025060	030060	035060	040060	050060	060060	-	-	-
80	450	MC-08-045-	-	-	-	-	-	050080	060080	070080	-	-
	750	MC-08-075-	020080	025080	030080	035080	040080	050080	060080	070080	080080	090080
	1300	MC-08-130-	020080	025080	030080	035080	040080	050080	060080	070080	080080	090080
	1500	MC-08-150-	020080	025080	030080	035080	040080	050080	060080	-	-	-
100	450	MC-08-045-	-	-	-	-	-	050100	060100	070100	-	-
	750	MC-08-075-	020100	025100	030100	035100	040100	050100	060100	070100	080100	090100
	1300	MC-08-130-	020100	025100	030100	035100	040100	050100	060100	070100	080100	090100
	1500	MC-08-150-	020100	025100	030100	035100	040100	050100	060100	-	-	-
120	450	MC-08-045-	-	-	-	-	-	050120	060120	070120	-	-
	750	MC-08-075-	020120	025120	030120	035120	040120	050120	060120	070120	080120	090120
	1300	MC-08-130-	020120	025120	030120	035120	040120	050120	060120	070120	080120	090120
	1500	MC-08-150-	020120	025120	030120	035120	040120	050120	060120	-	-	-
150	450	MC-08-045-	-	-	-	-	-	050150	060150	070150	-	-
	750	MC-08-075-	020150	025150	030150	035150	040150	050150	060150	070150	080150	090150
	1300	MC-08-130-	020150	025150	030150	035150	040150	050150	060150	070150	080150	090150
	1500	MC-08-150-	020150	025150	030150	035150	040150	050150	060150	-	-	-

PTA 0.035"

球囊长度 (mm)	工作长度 (mm)	型号参考	球囊直径 (mm)/ 产品型号目录											
			2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
20	450	MC-09-045-	020020	025020	030020	035020	040020	050020	060020	070020	080020	090020	100020	120020
	750	MC-09-075-	020020	025020	030020	035020	040020	050020	060020	070020	080020	090020	-	-
	1000	MC-09-100-	-	-	030020	-	040020	050020	060020	070020	080020	090020	100020	120020
	1100	MC-09-110-	020020	025020	030020	035020	040020	050020	-	-	-	-	-	-
	1300	MC-09-130-	-	-	030020	-	040020	050020	060020	070020	080020	-	-	-
40	450	MC-09-045-	020040	025040	030040	035040	040040	050040	060040	070040	080040	090040	100040	120040
	750	MC-09-075-	020040	025040	030040	035040	040040	050040	060040	070040	080040	090040	-	-
	1000	MC-09-100-	-	-	030040	-	040040	050040	060040	070040	080040	090040	100040	120040
	1100	MC-09-110-	020040	025040	030040	035040	040040	050040	-	-	-	-	-	-
	1300	MC-09-130-	-	-	030040	-	040040	050040	060040	070040	080040	-	-	-
60	450	MC-09-045-	020060	025060	030060	035060	040060	050060	060060	070060	080060	090060	100060	120060
	750	MC-09-075-	020060	025060	030060	035060	040060	050060	060060	070060	080060	090060	-	-
	1000	MC-09-100-	-	-	030060	-	040060	050060	060060	070060	080060	090060	100060	120060
	1100	MC-09-110-	020060	025060	030060	035060	040060	050060	-	-	-	-	-	-
	1300	MC-09-130-	-	-	030060	-	040060	050060	060060	070060	080060	-	-	-
80	450	MC-09-045-	020080	025080	030080	035080	040080	050080	060080	070080	080080	090080	100080	120080
	750	MC-09-075-	020080	025080	030080	035080	040080	050080	060080	070080	080080	090080	-	-
	1000	MC-09-100-	-	-	030080	-	040080	050080	060080	070080	080080	090080	100080	120080
	1100	MC-09-110-	020080	025080	030080	035080	040080	050080	-	-	-	-	-	-
	1300	MC-09-130-	-	-	030080	-	040080	050080	060080	070080	080080	-	-	-
100	450	MC-09-045-	020100	025100	030100	035100	040100	050100	060100	070100	080100	090100	100100	120100
	750	MC-09-075-	020100	025100	030100	035100	040100	050100	060100	070100	080100	090100	-	-
	1000	MC-09-100-	-	-	030100	-	040100	050100	060100	070100	080100	090100	100100	120100
	1100	MC-09-110-	020100	025100	030100	035100	040100	050100	-	-	-	-	-	-
	1300	MC-09-130-	-	-	030100	-	040100	050100	060100	070100	080100	-	-	-
120	450	MC-09-045-	020120	025120	030120	035120	040120	050120	060120	070120	080120	090120	100120	120120
	750	MC-09-075-	020120	025120	030120	035120	040120	050120	060120	070120	080120	090120	-	-
	1000	MC-09-100-	-	-	030120	-	040120	050120	060120	070120	080120	090120	100120	120120
	1100	MC-09-110-	020120	025120	030120	035120	040120	050120	-	-	-	-	-	-
	1300	MC-09-130-	-	-	030120	-	040120	050120	060120	070120	080120	-	-	-
150	450	MC-09-045-	020150	025150	030150	035150	040150	050150	060150	070150	080150	090150	100150	120150
	750	MC-09-075-	020150	025150	030150	035150	040150	050150	060150	070150	080150	090150	-	-
	1000	MC-09-100-	-	-	030150	-	040150	050150	060150	070150	080150	090150	100150	120150
	1100	MC-09-110-	020150	025150	030150	035150	040150	050150	-	-	-	-	-	-
	1300	MC-09-130-	-	-	030150	-	040150	050150	060150	070150	080150	-	-	-



技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

PTA 0.014"

性能	参数
额定爆破压	14atm
兼容导丝	0.014"
命名压	6atm
球囊直径	1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0(mm)
球囊长度	15/20/40/80/100/120/150(mm)
工作长度	1000/1300/1400/1500(mm)

PTA 0.018"

性能	参数
额定爆破压	10atm(9.0mm),12atm(6.0-8.0mm),14atm(2.0-5.0mm)
兼容导丝	0.018"
命名压	6atm
球囊直径	2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0(mm)
球囊长度	20/40/60/80/100/120/150(mm)
工作长度	450/750/1300/1500(mm)

PTA 0.035"

性能	参数
额定爆破压	10atm(9.0-12.0mm);12atm(6.0-8.0mm);14atm(2.0-5.0mm)
兼容导丝	0.035"
命名压	6atm
球囊直径	2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0(mm)
球囊长度	20/40/60/80/100/120/150(mm)
工作长度	450/750/1000/1100/1300(mm)

临床应用 CLINICAL APPLICATION


■ PTA 0.014"

【膝下动脉狭窄常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)		导管长度 (mm)
	120	150	
2.0	MC-07-150-020120	MC-07-150-020150	1500
2.5	MC-07-150-025120	MC-07-150-025150	1500
3.0	MC-07-150-030120	MC-07-150-030150	1500

【颈动脉狭窄临床常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)		导管长度 (mm)
	15	20	
3.0	MC-07-130-030015	MC-07-130-030020	1300
3.5	MC-07-130-035015	MC-07-130-035020	1300
4.0	MC-07-130-040015	MC-07-130-040020	1300
5.0	MC-07-130-050015	MC-07-130-050020	1300
3.0	MC-07-150-030015	MC-07-150-030020	1500
3.5	MC-07-150-035015	MC-07-150-035020	1500
4.0	MC-07-150-040015	MC-07-150-040020	1500
5.0	MC-07-150-050015	MC-07-150-050020	1500

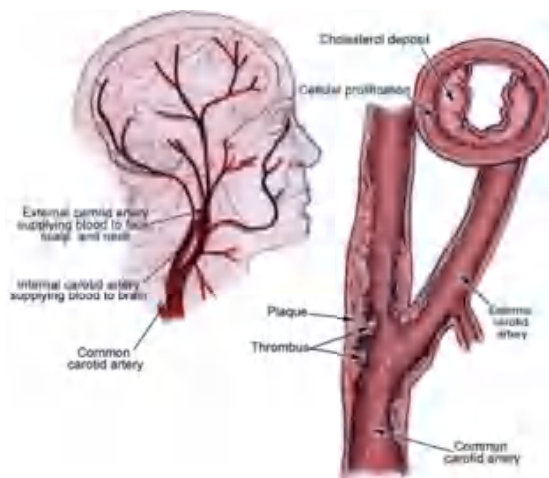


颈动脉支架血管成形术 (CAS)

【锁骨下动脉狭窄常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)				导管长度 (mm)
	20	40	60	80	
6.0	MC-08-130-060020	MC-08-130-060040	MC-08-130-060060	MC-08-130-060080	1300
8.0	MC-08-130-080020	MC-08-130-080040	MC-08-130-080060	MC-08-130-080080	1300

【人工动静脉瘘狭窄 (AVF) 常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)		导管长度 (mm)
	40	60	
4.0	MC-08-075-040040	MC-08-075-040060	750
5.0	MC-08-075-050040	MC-08-075-050060	750
6.0	MC-08-075-060040	MC-08-075-060060	750
7.0	MC-08-075-070040	MC-08-075-070060	750

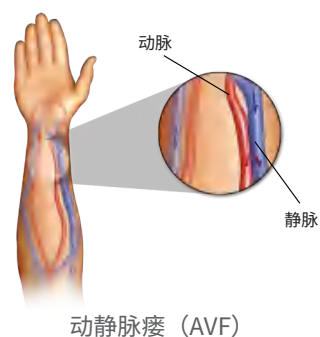

【下肢膝上动脉狭窄常用球囊型号】

■ 髂股动脉 (HFA) ■ 腘动脉 (Popliteal Artery) ■ 股动脉 (Femoral Artery) ■ 股浅动脉 (SFA)

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)					导管长度 (mm)
	60	80	100	120	150	
4.0	MC-08-150-040060	MC-08-150-040080	MC-08-150-040100	MC-08-150-040120	MC-08-150-040150	1500
5.0	MC-08-150-050060	MC-08-150-050080	MC-08-150-050100	MC-08-150-050120	MC-08-150-050150	1500
6.0	MC-08-150-060060	MC-08-150-060080	MC-08-150-060100	MC-08-150-060120	MC-08-150-060150	1500

【膝下动脉狭窄常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)		导管长度 (mm)
	120	150	
2.0	MC-08-150-020120	MC-08-150-020150	1500
2.5	MC-08-150-025120	MC-08-150-025150	1500
3.0	MC-08-150-030120	MC-08-150-030150	1500

PTA 0.035"

【锁骨下动脉狭窄常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)				导管长度 (mm)
	20	40	60	80	
6.0	MC-09-130-060020	MC-09-130-060040	MC-09-130-060060	MC-09-130-060080	1300
8.0	MC-09-130-080020	MC-09-130-080040	MC-09-130-080060	MC-09-130-080080	1300

【人工动静脉瘘狭窄 (AVF) 常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)		导管长度 (mm)
	40	60	
4.0	MC-09-075-040040	MC-09-075-040060	750
5.0	MC-09-075-050040	MC-09-075-050060	750
6.0	MC-09-075-060040	MC-09-075-060060	750
7.0	MC-09-075-070040	MC-09-075-070060	750

【下肢膝上动脉狭窄常用球囊型号】

■ 髂股动脉 (HFA) ■ 腘动脉 (Popliteal Artery) ■ 股动脉 (Femoral Artery) ■ 股浅动脉 (SFA)

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)					导管长度 (mm)
	60	80	100	120	150	
4.0	MC-09-130-040060	MC-09-130-040080	MC-09-130-040100	MC-09-130-040120	MC-09-130-040150	1300
5.0	MC-09-130-050060	MC-09-130-050080	MC-09-130-050100	MC-09-130-050120	MC-09-130-050150	1300
6.0	MC-09-130-060060	MC-09-130-060080	MC-09-130-060100	MC-09-130-060120	MC-09-130-060150	1300

【腘动脉狭窄手术常用球囊型号】

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)			导管长度 (mm)
	40	60	80	
6.0	MC-09-130-060040	MC-09-130-060060	MC-09-130-060080	1300
8.0	MC-09-130-080040	MC-09-130-080060	MC-09-130-080080	1300



快速交换型颅内球囊扩张导管

NEUCROSS™ RX

S-Coating 外涂层
和内硅油双涂层
游刃有余

无缝过渡衔接技术
提供充沛的推送力

守护生命之光
Brighten the life

折叠外径小
通过性能卓越

A-Advance 尖端
快速进入

订货信息 ORDERING INFORMATION

球囊长度 (mm)	球囊直径 (mm)/ 产品型号目录											
	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	4.0
8	MC-11-1008	1208	1508	1708	2008	2208	2508	2708	3008	3208	3508	4008
10	MC-11-1010	1210	1510	1710	2010	2210	2510	2710	3010	3210	3510	4010
15	MC-11-1015	1215	1515	1715	2015	2215	2515	2715	3015	3215	3515	4015
20	MC-11-1020	1220	1520	1720	2020	2220	2520	2720	3020	3220	3520	4020

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

性能	参数
命名压	6atm
额定爆破压	12atm
兼容导丝	0.014"
兼容导管	5F
推送杆长度	155cm

顺应性表格 COMPLIANCE INFORMATION


ø(mm)	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	4.0
Pressure(atm)												
2	0.90	1.15	1.40	1.65	1.87	2.15	2.36	2.60	2.82	3.05	3.30	3.78
4	0.95	1.20	1.45	1.70	1.94	2.20	2.45	2.67	2.91	3.15	3.40	3.90
6 (NP)	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00
8	1.05	1.30	1.55	1.80	2.05	2.35	2.57	2.85	3.10	3.35	3.63	4.13
10	1.10	1.35	1.60	1.85	2.11	2.40	2.64	2.95	3.18	3.45	3.74	4.25
12 (RBP)	1.15	1.40	1.65	1.90	2.19	2.50	2.71	3.00	3.27	3.55	3.85	4.35
14	1.20	1.45	1.70	1.95	2.25	2.55	2.80	3.05	3.35	3.65	3.95	4.45



整体交换型颅内球囊扩张导管

NEUCROSS™ OTW

守护生命之光
Brighten the life

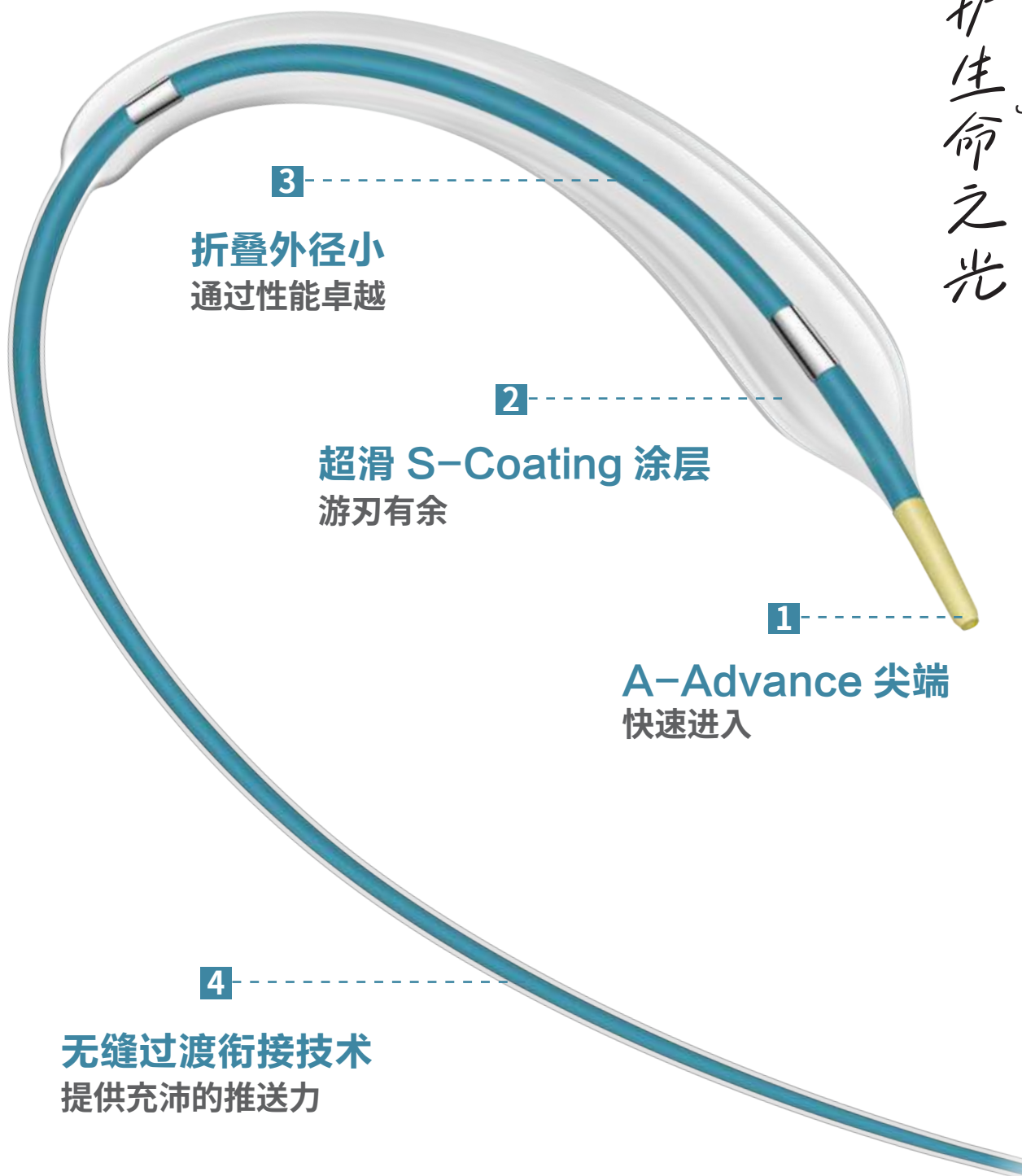

NMPA 注册证号：国械注准 20223031218

订货信息 ORDERING INFORMATION


球囊长度 (mm)	球囊直径 (mm)/ 产品型号目录									
	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	4.0
8	MC-12-1508	1708	2008	2208	2508	2708	3008	3208	3508	4008
10	MC-12-1510	1710	2010	2210	2510	2710	3010	3210	3510	4010
15	MC-12-1515	1715	2015	2215	2515	2715	3015	3215	3515	4015

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

性能	参数
命名压	6atm
额定爆破压	12atm
兼容导丝	0.014"
兼容导管	5F
推送杆长度	155cm

顺应性表格 COMPLIANCE INFORMATION

ø(mm)	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	4.0
Pressure(atm)										
2	1.40	1.65	1.87	2.15	2.36	2.60	2.82	3.05	3.30	3.78
4	1.45	1.70	1.94	2.20	2.45	2.67	2.91	3.15	3.40	3.90
6 (NP)	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00
8	1.55	1.80	2.05	2.35	2.57	2.85	3.10	3.35	3.63	4.13
10	1.60	1.85	2.11	2.40	2.64	2.95	3.18	3.45	3.74	4.25
12 (RBP)	1.65	1.90	2.19	2.50	2.71	3.00	3.27	3.55	3.85	4.35
14	1.70	1.95	2.25	2.55	2.80	3.05	3.35	3.65	3.95	4.45

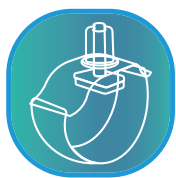

动脉压迫止血器

R&B™

特殊弹簧设计

灵活调整压力，止血更简单

1

4 双矩螺纹结构

稳固不位移，止血更可靠

5 特色指示标环

止血压力可视、直观

鉴证平衡之美

Harmony in Balance

准确点对压

不影响血液回流

2

3

高亮透明树脂

在直视下能准确进行止血操作

6

透明舒适软垫

柔软舒适，可准确观察出血点情况



圆型压迫头 C



方型压迫头 S

订货信息 ORDERING INFORMATION

型号规格	桡动脉 (R)			肱动脉 (B)
圆型压迫头 C	MTD01-R-22C	MTD01-R-25C	MTD01-R-28C	MTD01-B-25C
方型压迫头 S	MTD01-R-22S	MTD01-R-25S	MTD01-R-28S	MTD01-B-25S

产品信息 PRODUCT INFORMATION

适用范围

适用于动脉导管插管术后穿刺点闭合压迫止血用

创新设计优点

人体学压板设计，直接可以平衡的贴合手臂


圆形带凸点压迫块设计，可以高度拟真指压压迫

兼容性强

在高度适应桡动脉穿刺止血使用外，可兼容适用肱动脉穿刺止血使用

产品特点

- 快捷安装，操作简单
- 压迫力集中，仿真指压柔软弹性胶垫让患者更舒适
- 手动微调控不同压迫力大小参考刻度，操作更加灵敏方便
- 弹簧施压螺纹调节使压迫力更加平稳，止血更加可靠
- 透明压迫块可以更直观的了解穿刺点情况，实时掌控止血状态
- 主要用于桡动脉压迫止血，也可兼容肱动脉压迫止血

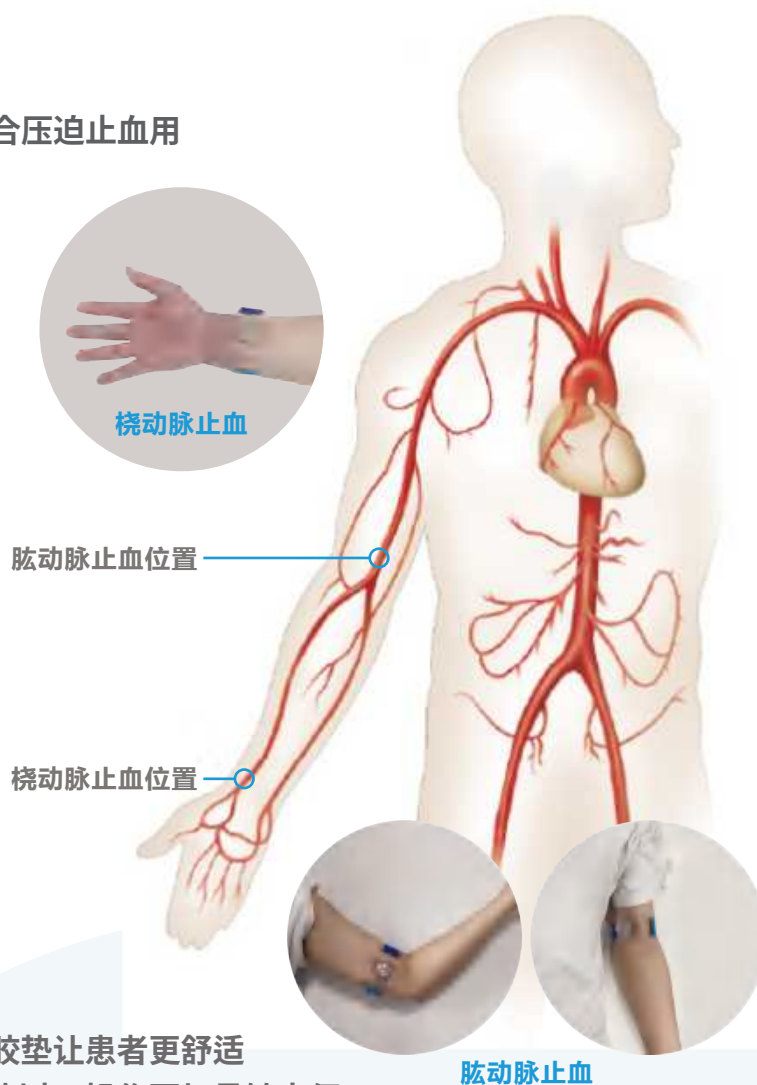



一次性使用非血管腔道斑马导丝

SMOWire™

行云流水

Anywhere, Anyreach

1

铂镍弹簧

- 显影效果好
- 准确定位

2

镍钛核芯

- 提供良好的支撑力
- 扭转刚度极佳

3

亲水涂层

- 超滑亲水涂层，
表面更顺滑
- 大大减少对非血管腔道的损伤

4

TPU 包覆层

- 具有良好的柔韧性、
耐磨损性、抗撕裂性
- X 射线可探测性，助力精准定位

5

PTFE 包覆层


- 波浪形的表面设计
- 器械交换摩擦力更小

NMPA 注册证号：粤械注准 20232020969


产品参数 PRODUCT PARAMETER

规格 (inch)	0.021、0.025、0.028、0.032、0.035、0.038
长度 (cm)	150、260、450
形状	直头、弯头

构造示意图 STRUCTURE DIAGRAM

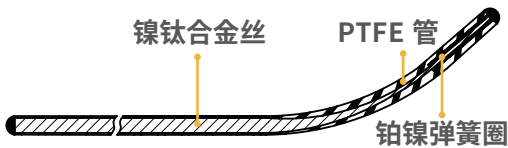


斑马导丝

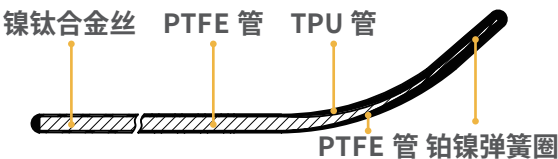

混合结构斑马导丝

产品规格型号 PRODUCT SPECIFICATION

导丝直径 (inch)	尖端形状		导丝长度 (cm)		
			150	260	450
0.021	斑马	直头	GZ211504-S	GZ212604-S	GZ214504-S
		弯头	GZ211504-A	GZ212604-A	GZ214504-A
0.025		直头	GZ251504-S	GZ252604-S	GZ254504-S
		弯头	GZ251504-A	GZ252604-A	GZ254504-A
0.028		直头	GZ281504-S	GZ282604-S	GZ284504-S
		弯头	GZ281504-A	GZ282604-A	GZ284504-A
0.032		直头	GZ321504-S	GZ322604-S	GZ324504-S
		弯头	GZ321504-A	GZ322604-A	GZ324504-A
0.035		直头	GZ351504-S	GZ352604-S	GZ354504-S
		弯头	GZ351504-A	GZ352604-A	GZ354504-A
0.038		直头	GZ381504-S	GZ382604-S	GZ384504-S
		弯头	GZ381504-A	GZ382604-A	GZ384504-A
0.021	混合	直头	GZ211501-SSH	GZ212601-SSH	GZ214501-SSH
		弯头	GZ211501-5AH	GZ212601-5AH	GZ214501-5AH
0.025		直头	GZ251501-SSH	GZ252601-SSH	GZ254501-SSH
		弯头	GZ251501-5AH	GZ252601-5AH	GZ254501-5AH
0.028		直头	GZ281501-SSH	GZ282601-SSH	GZ284501-SSH
		弯头	GZ281501-5AH	GZ282601-5AH	GZ284501-5AH
0.032		直头	GZ321501-SSH	GZ322601-SSH	GZ324501-SSH
		弯头	GZ321501-5AH	GZ322601-5AH	GZ324501-5AH
0.035		直头	GZ351501-SSH	GZ352601-SSH	GZ354501-SSH
		弯头	GZ351501-5AH	GZ352601-5AH	GZ354501-5AH
0.038		直头	GZ381501-SSH	GZ382601-SSH	GZ384501-SSH
		弯头	GZ381501-5AH	GZ382601-5AH	GZ384501-5AH

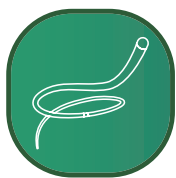

导丝

STRwire™

矫若游龙

Fluent Crossing Flexibility

1 可靠的安全性

- 双弯结构避免尖端刺激心室
- 提供绝佳的安全性

2 良好的通过性

- 通体 PTFE 涂层设计
- 摩擦系数低，更顺滑且推送性与跟踪性更好

3 优越的支撑性

- 304 不锈钢核芯具有高强硬度
- 保持卓越的支撑性

4

广泛的适用性

- 血管诊断或治疗手术、腹主动脉瘤介入手术、左心耳封堵术
- 经导管主动脉瓣置换术 (TAVR)、胸主动脉、卵圆孔未闭、房间隔缺损等适应症

5

出色的显影性

- 24K 黄金弹簧圈
- 具有良好的显影性能且更容易精准定位



产品参数 PRODUCT PARAMETER

规格 (inch)	0.035
头端形态	直头、弯头、小双弯、大双弯
长度 (cm)	90、145、180、260、300



构造示意图 STRUCTURE DIAGRAM



产品规格型号 PRODUCT SPECIFICATION

规格型号	导丝外径 (inch)	黄金绕丝长度 (cm)	绕丝长度 (cm)	有效长度 (cm)	弯头尺寸	头端形状
GPA350901-S3	0.035	1	90	90	/	直头
GPA350901-S7	0.035	1	90	90	/	直头
GPA351451-S3	0.035	1	145	145	/	直头
GPA351451-S7	0.035	1	145	145	/	直头
GPA351801-S3	0.035	1	180	180	/	直头
GPA351801-S7	0.035	1	180	180	/	直头
GPA352601-S3	0.035	1	260	260	/	直头
GPA352601-S7	0.035	1	260	260	/	直头
GPA353001-S3	0.035	1	300	300	/	直头
GPA353001-S7	0.035	1	300	300	/	直头
GPP350904-S	0.035	4	15	90	/	直头
GPP350907-S	0.035	7	15	90	/	直头
GPP351454-S	0.035	4	15	145	/	直头
GPP351457-S	0.035	7	15	145	/	直头
GPP351804-S	0.035	4	15	180	/	直头
GPP351807-S	0.035	7	15	180	/	直头
GPP352604-S	0.035	4	15	260	/	直头
GPP352604-J	0.035	4	15	260	7.5	弯头
GPP352604-DC	0.035	4	15	260	内弯 :15 外弯 :55	小双弯
GPP352604-EDC	0.035	4	15	260	内弯 :15 外弯 :75	大双弯
GPP353004-S	0.035	4	15	300	/	直头
GPP353004-J	0.035	4	15	300	7.5	弯头
GPP353004-DC	0.035	4	15	300	内弯 :15 外弯 :55	小双弯
GPP353004-EDC	0.035	4	15	300	内弯 :15 外弯 :75	小双弯



超声刀具

MeSonic™

更长的寿命

刀芯采用改良钛合金材料

1



更广的覆盖

配备 140mm—450mm 刀杆，适用范围广

3

2

更多的功能

同时具备切割、凝闭、背切、穿孔、抓持及分离等功能

4


独特的设计

独有刀头的可旋转专利，任何角度都可以舒适操作，减轻操作者疲劳强度

兼济天下
Benefit the world

更强的兼容
适配多款主机，
降低成本


6

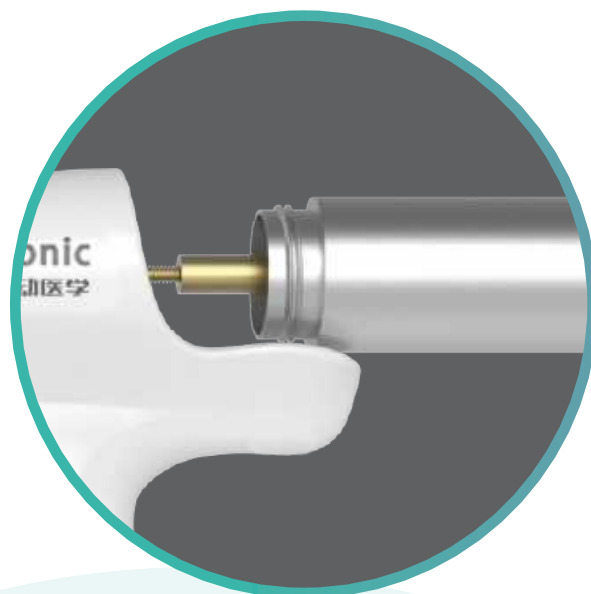

5

舒适的握持

人体工学设计，握持部分双
色注塑，使用更舒适，更安
全可靠

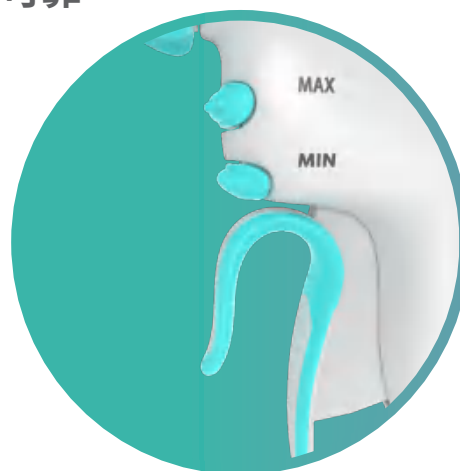



订货信息 ORDERING INFORMATION

型号	刀杆有效长度	标称频率	使用方法
MY-01-140-F55	140mm	55.5kHz	一次性使用
MY-01-230-F55	230mm	55.5kHz	一次性使用
MY-01-360-F55	360mm	55.5kHz	一次性使用
MY-01-450-F55	450mm	55.5kHz	一次性使用



技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

超声刀具以 MY-01 为产品类别代号，以刀杆有效长度，标称频率来制定不同的规格型号，长度分为：140mm、230mm、360mm、450mm，标称频率为 55.5kHz。

超声刀主机说明：

主机负责提供稳定、实时的超声频率电信号。主机发生器的高频电流通过换能器，将高频电流转换成超声高频机械震动能量。机械能量传递至刀头，实现对软组织的切割和凝闭。
(刀头振动频率约为 55.5kHz)





脉动球囊定制服务

BDC CUSTOMIZATION SERVICE



球囊定制 BALLOON CUSTOMIZATION

球囊性能	参数
球囊直径 (mm)	0.7mm 至 40mm
球囊长度 (mm)	5mm 至 250mm
形状	圆柱形、球形、椭圆形 (可定制)
材料	聚酰胺和工程尼龙 (如 Pebax®) 等 (可定制)
球囊末端	锥形尖角、锥形圆边角等 (可定制)
球囊腔	单腔和多腔球囊
标记环数量	0、1、2、3



球囊顺应性 BALLOON COMPLIANCE

分类	非顺应性球囊	半顺应性球囊	顺应性球囊
强度	超高	高	低
材料	尼龙 +Pebax, 尼龙	Pebax, 尼龙	TPU, TPE, 弹性体和其他 热塑性弹性体制造
尺寸范围	直径 0.7mm-14mm 长度 5mm-180mm	直径 0.7mm-30mm 长度 5mm-280mm	直径 1mm-30mm 长度 5mm-180mm
额定爆破压力	18-40atm	10-16atm	0-2atm



导管定制 CATHETER CUSTOMIZATION

规格尺寸	结构类型
0.014"	快速交换型 (RX) 整体交换型 (OTW)
0.018"	
0.035"	

深圳脉动医学技术有限公司

📍 企业地址：深圳市南山区粤兴二道 1 号虚拟大学园重点实验室平台大楼 A 区 408

☎ 电话：+86-0755-26928966

江苏脉动医疗器械科技有限公司

📍 企业地址：江苏省盐城市滨海县东坎镇世纪大道 32 号

☎ 电话：+86-0515-84537776

深圳脉腾医学技术有限公司

📍 企业地址：深圳市南山区粤海街道高新社区粤兴二道 1 号虚拟大学园重点实验室平台大楼 401、A407-B402、B415-B420

☎ 电话：+86-0755-26928966

✉ 企业邮箱：zxy@medoo.hk

🌐 企业官网：www.medoo.hk

